



custo cardio 400

**Einfach.
Hygienisch.
Unabhängig.**



2in1

Sauganlage+
EKG-System




Für die custo cardio 400/400 accu gibt es drei verschiedene Saugelektroden: standard | hair | small



custo cardio 400/400 accu 12-Kanal-Ruhe- und Belastungs-EKG-System mit integrierter Sauganlage

custo cardio 400/400 accu setzt neue Maßstäbe in der Funktionalität, der Bedienbarkeit und der Hygiene. Dank der wechselbaren, wiederverwendbaren Saugelektroden ist eine hygienische und nachhaltige Anwendung garantiert. Die Akku-Variante ist komplett autark, lässt sich kabellos in Ihr WLAN-Netz einfügen und ist somit flexibel einsetzbar.

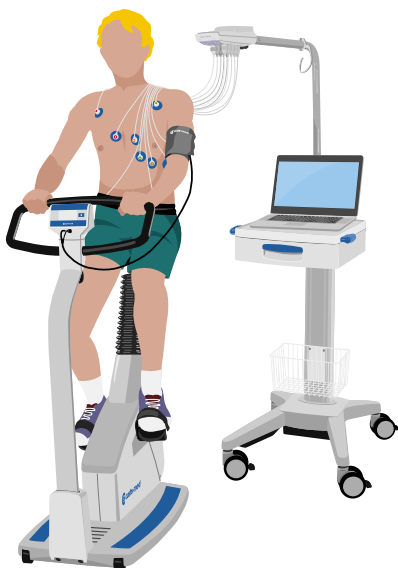

custo cardio 400/400 accu*:

- Schnelle, unkomplizierte Reinigung
- Perfekte Saugleistung in sechs Stufen
- Stabile und schnelle Datenübertragung
- *Keine Raumbindung, daher volle Flexibilität und Mobilität in der Anwendung
- *Mehr als 100 Ruhe-EKGs mit einer Akkuladung

Verschiedene Elektroden/Saugleitungen:

- Sehr gute Saugleistung bei schonender Anwendung durch angepassten Druck
- Elektroden und Saugleitungen einfach wechselbar
- Automatische Reinigung durch Ausblasen der Saugleitungen nach jeder Untersuchung



Ruhe-EKG-Highlights in der custo diagnostic-Software

Das gesamte EKG auf einen Blick.

EKG-Übersicht aller Kanäle über den gesamten Aufzeichnungszeitraum. Der zu analysierende Bereich ist automatisch einstellbar oder frei wählbar.

Alle wichtigen Werte kompakt visualisiert.

Umfangreiche Messwerttabellen unterstützen die automatische Vermessung und Interpretation.

Nützliche Zusatzoptionen.

Optionen wie HRV- Analyse und Sport-EKG erweitern das Ruhe-EKG ebenso wie die Möglichkeit eines Auswertungsvergleichs mit einer detaillierten Gegenüberstellung von zwei Auswertungen.

Zeitsparende und präzise Befunde.

Mit Hilfe der individuell erstellbaren Textbausteine ist der Befundhinweis schnell erstellt. Der Ausdruck fasst alle Ergebnisse und den Befundhinweis übersichtlich auf einer Seite zusammen.

Vielseitiges EKG-Interpretationsprogramm.



NEU: Sport-EKG als Option

Belastungs-EKG-Highlights in der custo diagnostic-Software

Einfache Steuerung der Untersuchung.


Unkomplizierte Steuerung von Laufbändern, Sitz- und Liege-Ergometern. Das Modul bietet vordefinierte Standardprofile mit der Möglichkeit, diese frei zu konfigurieren. Selbst während einer laufenden Ergometrie kann manuell in das Lastprofil eingegriffen werden.

Den Patienten immer im Blick.

Neben der ausführlichen Dokumentation gibt es vielfältige Benachrichtigungsmöglichkeiten mit akustischer oder visueller Ausgabe. Zusätzlich zur EKG-Ableitung können die Messwerte von Blutdruck, SpO₂ und Laktat automatisch erfasst werden. Selbstverständlich werden die ST-Strecken fortlaufend vermessen und grafisch dargestellt.

Zeitsparende und präzise Befunde.

Mit Hilfe der individuell erstellbaren Textbausteine ist der Befundhinweis schnell erstellt. Der Ausdruck fasst alle Ergebnisse und den Befundhinweis übersichtlich auf einer Seite zusammen.

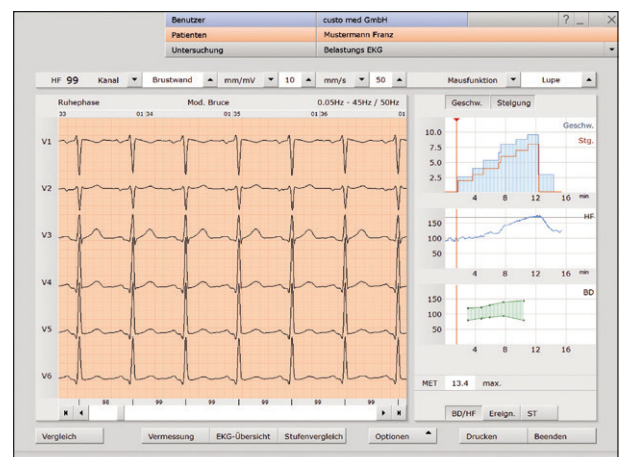

Übersichtliche Gesamtdarstellung aller wichtigen Werte

Innovative Systemlösungen für Ihre Diagnostik


Unsere Marke steht seit 1982 für innovative Systemlösungen in der kardiopulmonalen Diagnostik. In Kooperation mit kompetenten Vertriebs- und Servicepartnern bieten wir professionelle Lösungen an und berücksichtigen dabei Ihre individuellen Gegebenheiten und IT-Strukturen. Ob stationär oder mobil, Einzelplatz oder standortübergreifende Netzwerklösung, Praxis oder Klinik – Ihr modulares custo med-System ist eine lohnende Investition in die Zukunft.

Unsere modulare Plattform custo diagnostic ist die intelligente Verbindung zwischen Medizintechnik und Verwaltungssoftware.



Besuchen Sie uns auf YouTube!

www.customed.de

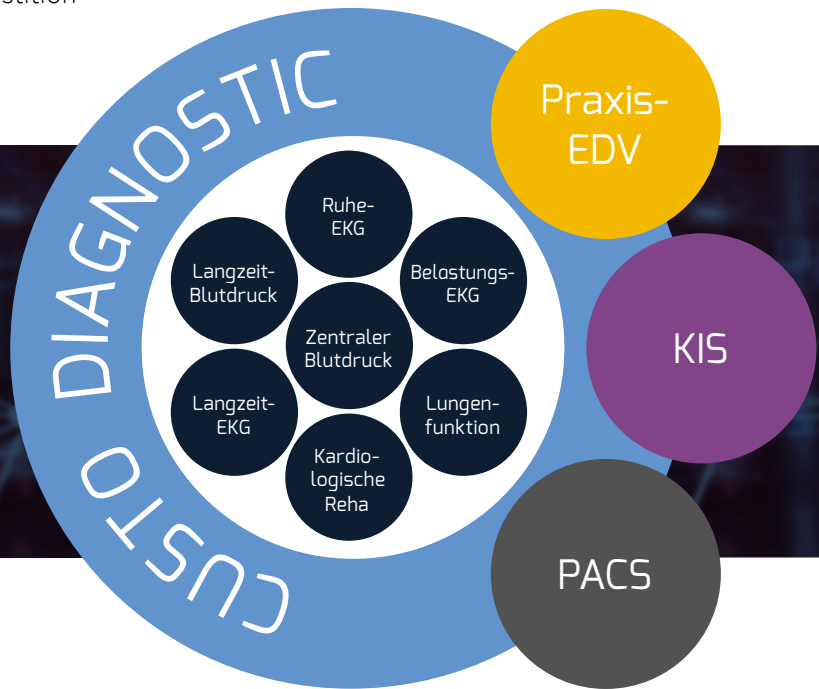

MEHR INFORMATIONEN

custo med GmbH • Maria-Merian-Straße 6 • 85521 Ottobrunn • Tel.: +49 (0) 89 710 98-00 • Fax: +49 (0) 89 710 98-10
E-Mail: info@customed.de • Bitte ausfüllen und an custo med faxen, schicken oder eingescannt per E-Mail senden.
Gerne können Sie auch unser Kontaktformular unter www.customed.de/kontakt nutzen.

Bitte senden Sie mir Ihren aktuellen Hauptkatalog zu.



MT-09.23

Bitte senden Sie mir Informationsmaterial per Post / per PDF .

Ruhe-/Belastungs-EKG

Langzeit-EKG

Langzeit-Blutdruck

Lungenfunktion

Klinik-IT

Kardiologische Reha

Hygienetaschen „custo clean“

Praxis-/Klinik-Anschrift:

Name _____

Ansprechpartner _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____